



Moldagem

e

modelos

**para um protetor
bucal esportivo**

Para o procedimento, é necessário (e suficiente):

- um alginato de boa qualidade,
- armazenado corretamente e
- nas condições do fabricante de proporção pó-líquido





Veja a diferença dos limites dos dois modelos de moldeiras





Portanto, se optar utilizar moldeiras metálicas: faça a personalização da moldeira com cera, aumenta a altura do flanco estibular, para realizar a cópia dos tecidos moles adequadamente






Realize a
seleção
das moldeiras

Lembre que precisará do
modelo de trabalho e do
antagonista!




Carregue a moldeira com o material de moldagem concentrado na região do arco e dos limites da moldeira.

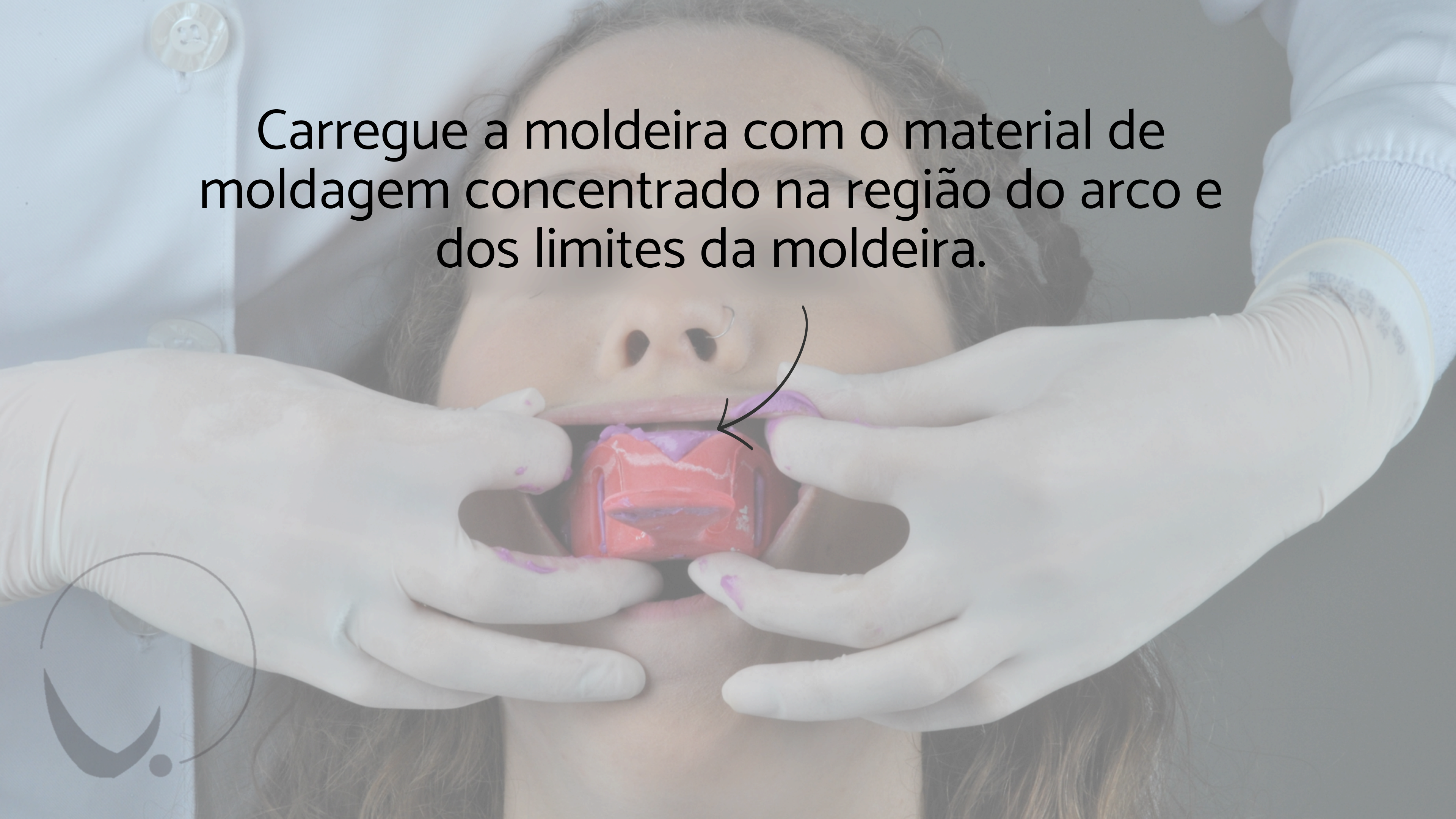

Tracione

os lábios e a mucosa jugal contra a moldeira, para garantir a cópia das regiões de flanco e fundo de sulco.

dica*: verifique se o lábio toca a moldeira, assim você sabe que copiou o freio labial

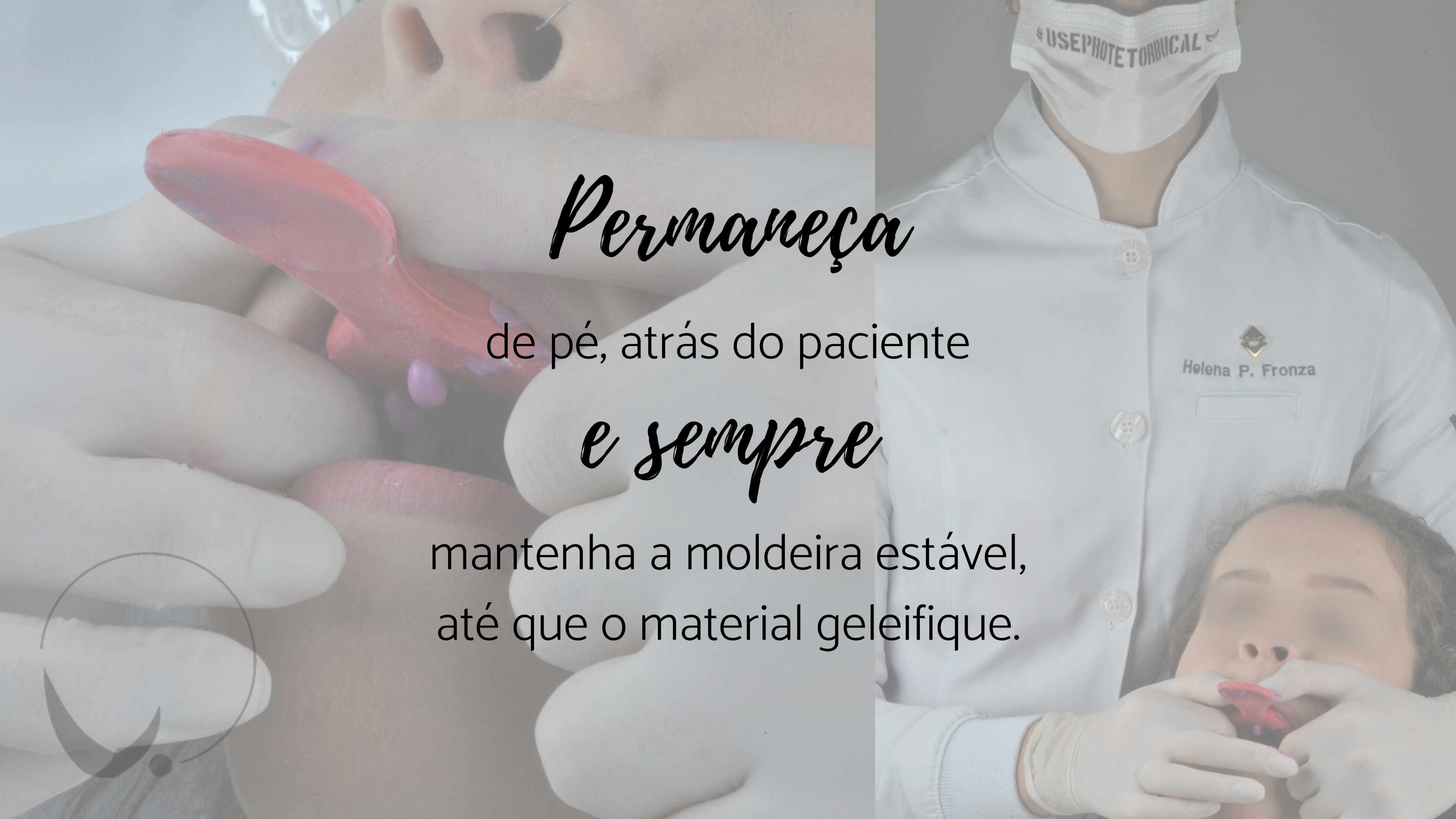

Permaneça

de pé, atrás do paciente

e sempre


mantenha a moldeira estável,
até que o material geleifique.

Como saber

se obtive sucesso no
procedimento de
moldagem?




Se é possível avaliar a cópia

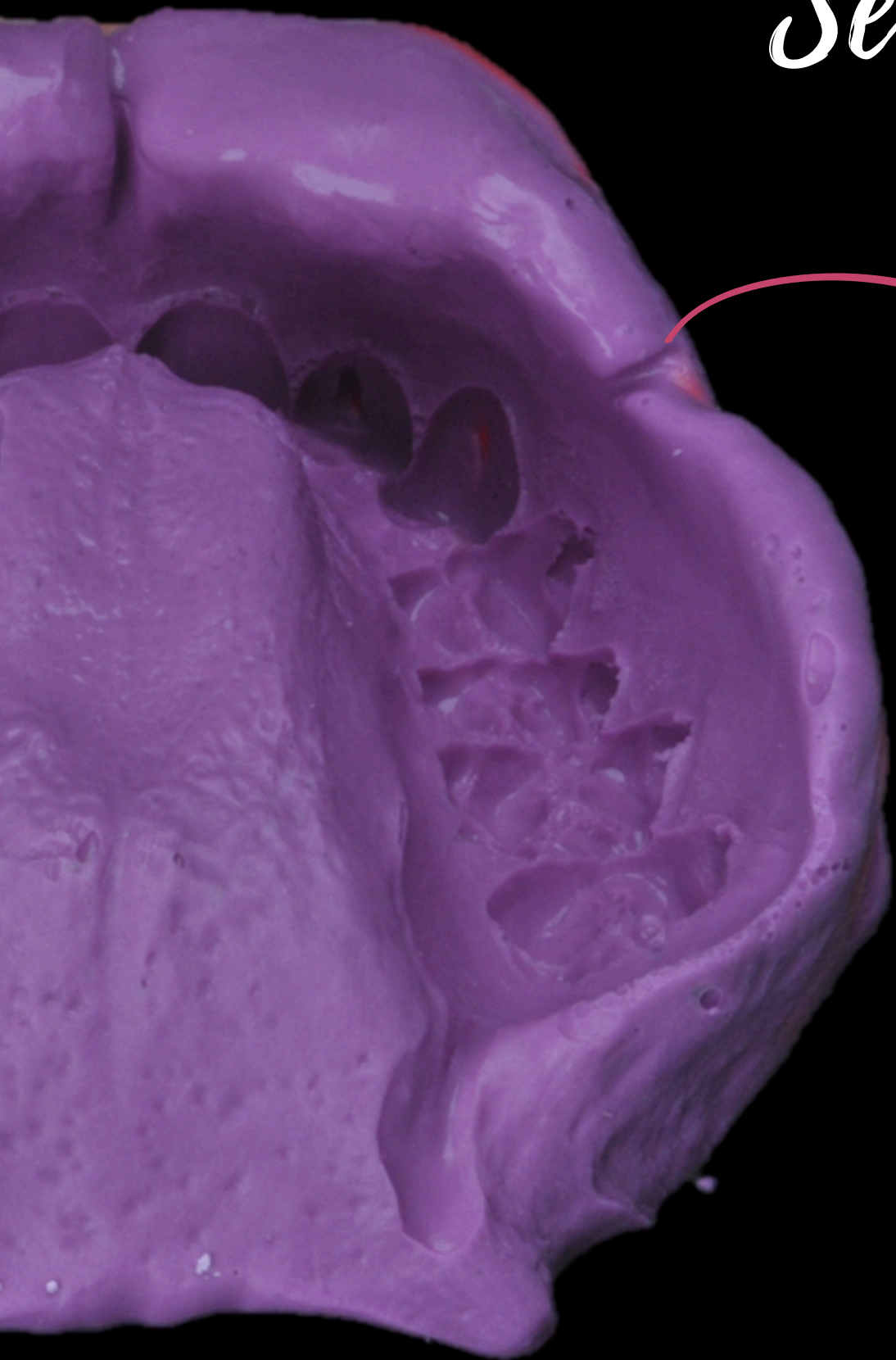

dos freios e bridas

dos flancos,
com bordos
arredondados e não
interrompidos

dos elementos
dentários

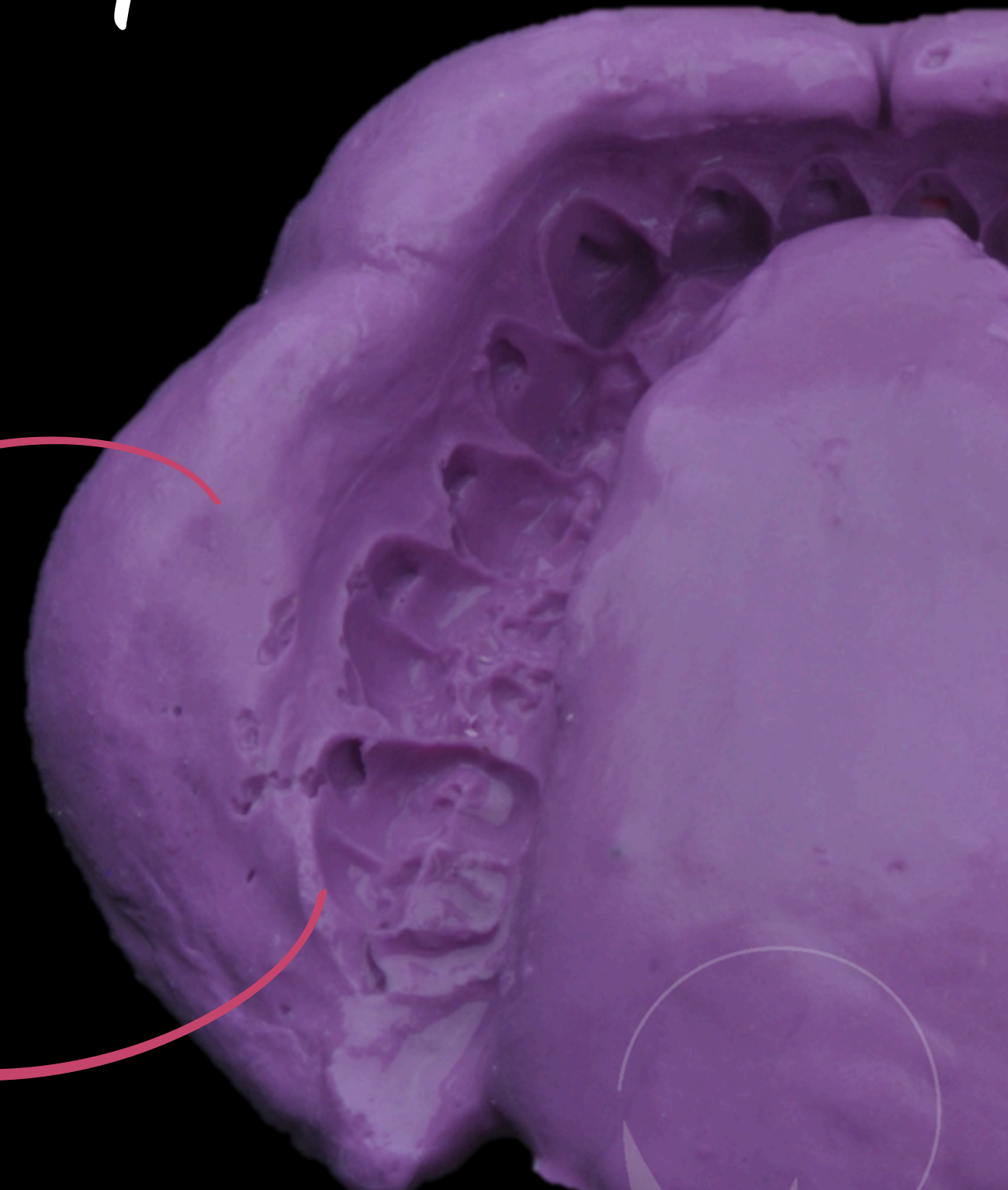

Um registro interoclusal em

*máxima
intercuspidação
habitual
(MIH)*

precisa ser obtido

utilize a técnica de captura que for mais ajustada à sua realidade



Confira

se o paciente está ocluindo corretamente


deixe os elementos anteriores livres de material de captura, para facilitar esta visualização e garantir o registro correto.




Para os modelos,

vaze em gesso do tipo pedra

Recorte

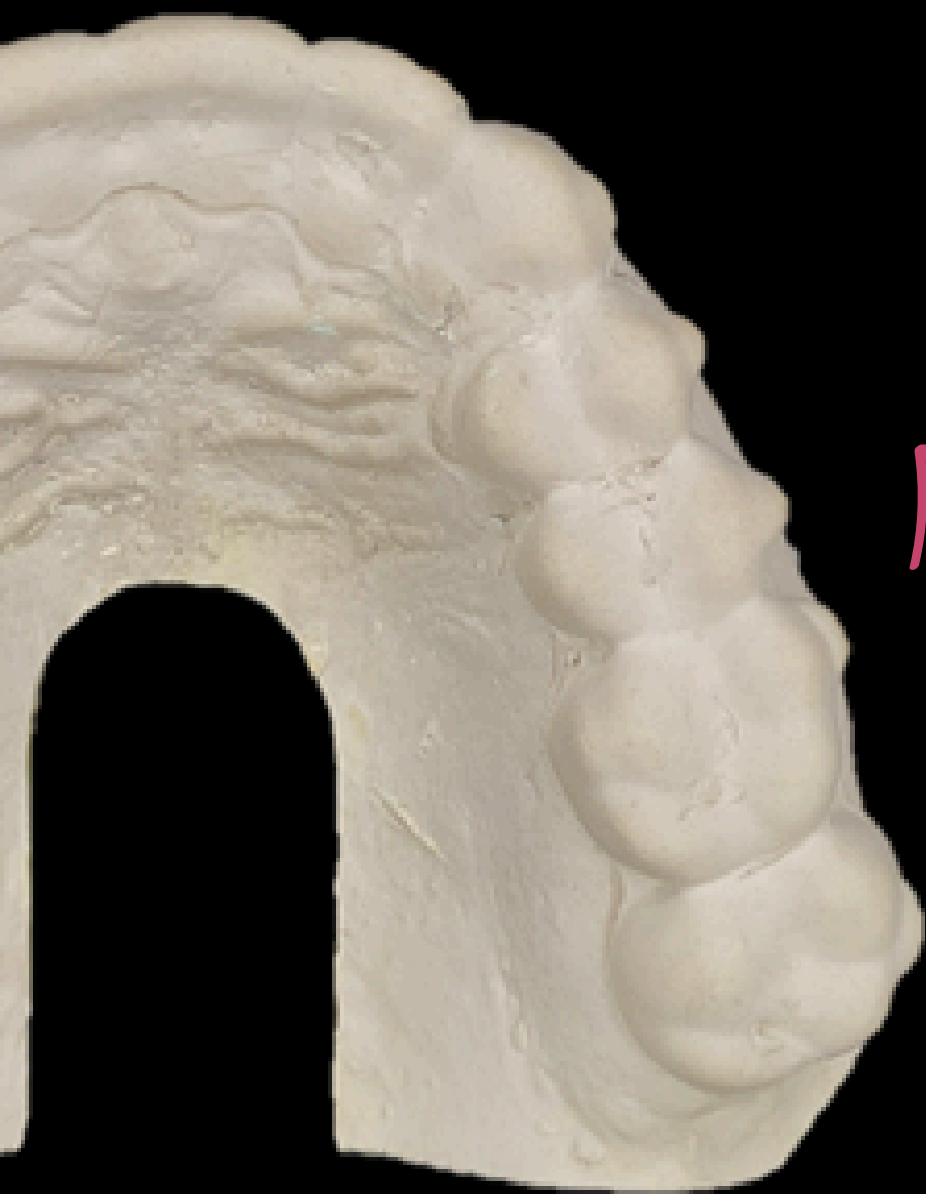



o palato em forma de
ferradura
ou faça um orifício na
região

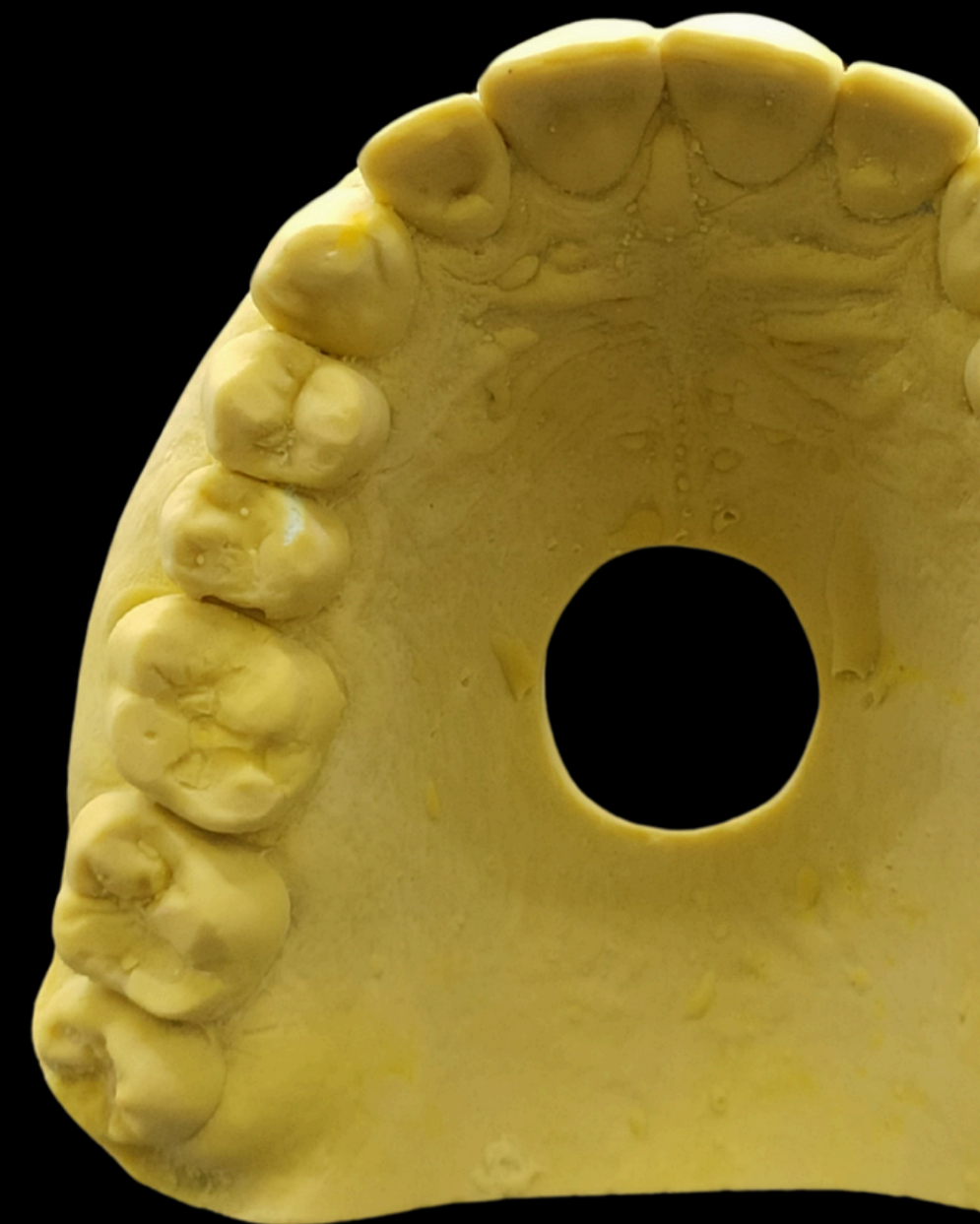

principalmente se for utilizar a técnica do tipo III.

Recorte

as retenções
horizontais
da região
superior e
posterior
dos
modelos.

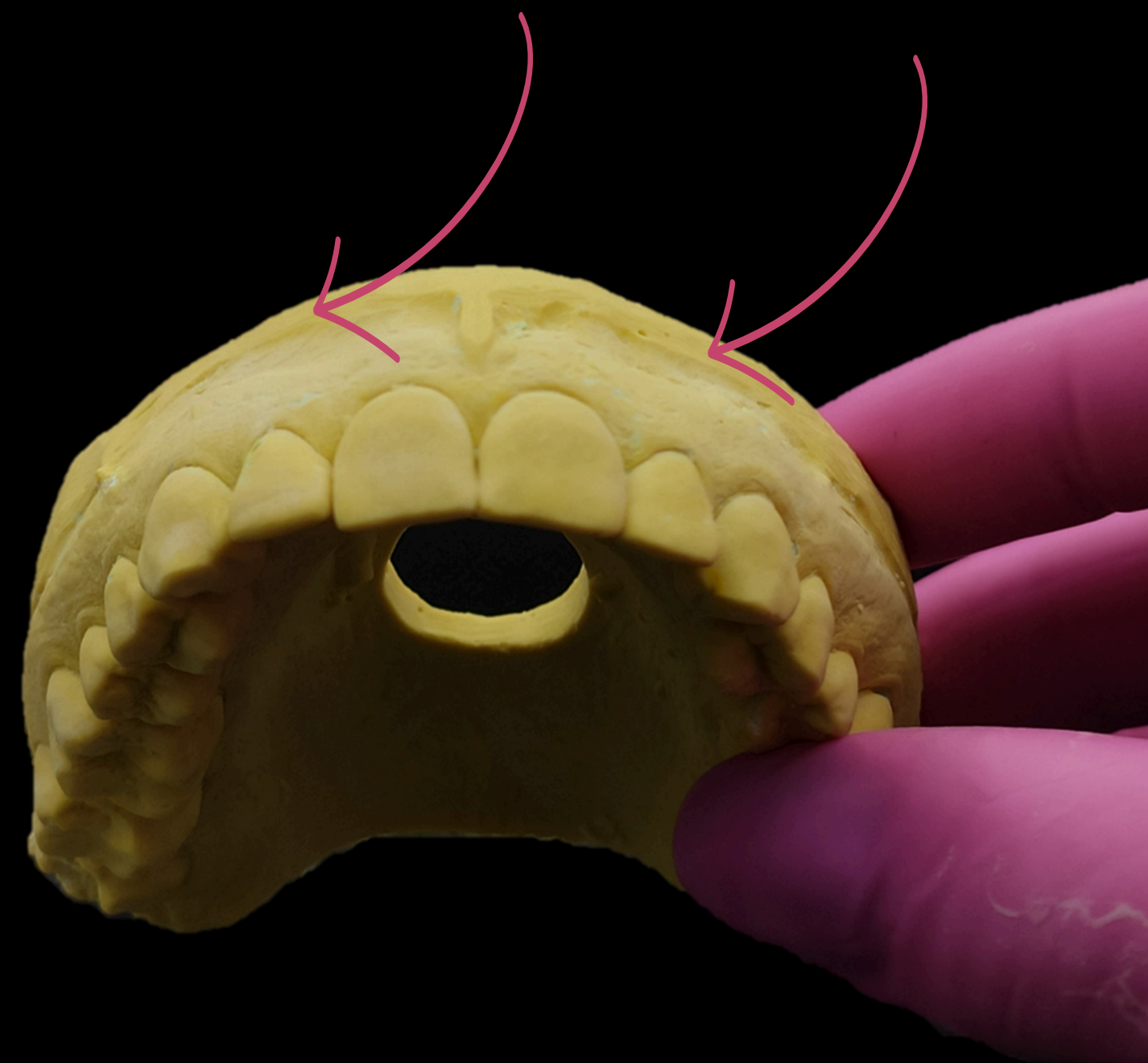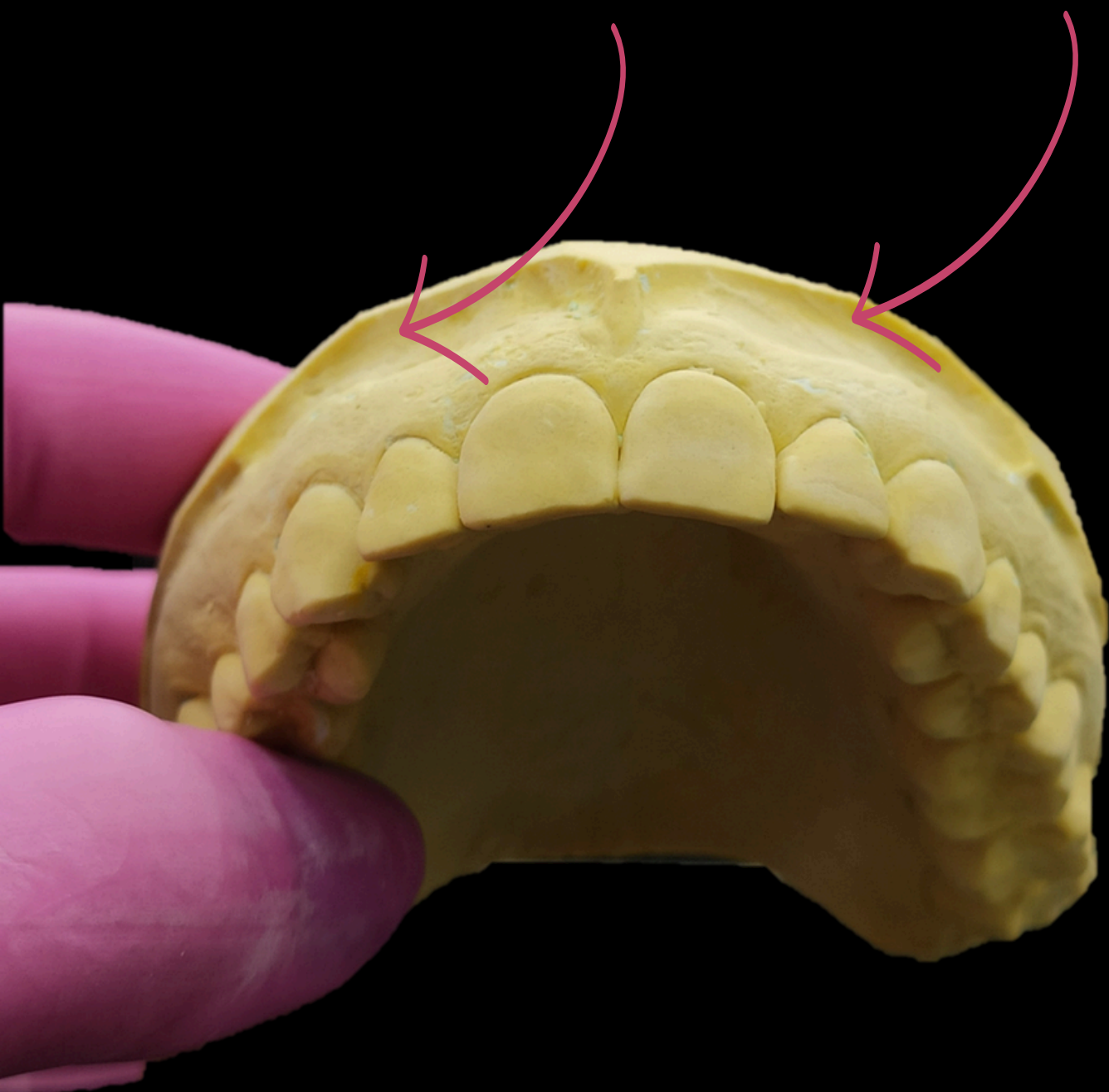

Remover



as bolhas positivas
com auxílio de um
instrumental, como
o Hollemback S ou
um esculpidor
Lecron.





deixe os modelos com uma

base estável

e não esqueça de

nomear ou catalogar

os mesmos, para que não se misturem entre
pacientes, especialmente se tratar-se de um
atendimento de equipe.





ATLAS
Research Group

[Aprenda muito mais clicando aqui!](#)